



GIG
CYMRU
NHS
WALES

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Aneurin Bevan
University Health Board

Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol (NIV) Dreamstation

Canllaw i Osod yr Offer



Cynnwys

Tudalen 2/3 Gosod y Dreamstation

Tudalen 4 Dechrau'r Driniaeth a dod â'r Driniaeth i ben

Tudalen 7 Ychwanegu therapi ocsigen

Tudalen 8 Cod QR

Gosod y Dreamstation

1. Dewiswch fan diogel wrth ymyl y gweld a rhowch yr uned arno - e.e. bwrdd ochr gwely heb betheuach arno.
2. Cysylltwch blwg DC yr uned ynni â chefn y peiriant a gadewch y plwg yn ei le. (Gweler y llun isod)




Plygiwch i mewn i'r brif allfa bŵer

****DS Os yw'n ddiogel gwneud hynny, gadewch yr uned wedi ei phlygio i mewn ac yn y modd 'Gorffwys' ar bob adeg***

3. Cysylltwch y tiwb ag allfa'r peiriant (gweler y llun isod)



4. Cysylltwch eich masg â phen arall y tiwb (gweler y llun)
DS At ddibenion darluniadol yn unig y mae'r masg a ddangosir ac efallai y bydd eich masg chi'n edrych yn wahanol.

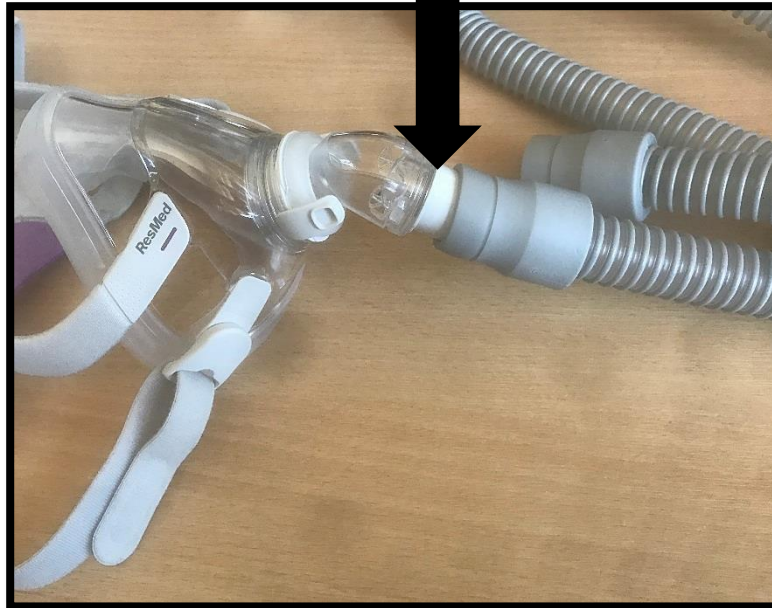

Mae'ch peiriant nawr yn barod i'w ddefnyddio.

Dechrau'r Driniaeth a Dod â'r Driniaeth i Ben

1. Sicrhewch fod y cyflenwad trydan ymlaen a gwasgwch y botwm 'start' fel y dangosir yn y llun. Bydd eich peiriant nawr yn dechrau darparu aer ar y pwysedd sydd wedi ei osod.



2. Gwisgwch eich masg, gan sicrhau bod sêl dda rhwng y masg a'ch wyneb.
(Neu gallwch wisgo'r masg cyn dechrau'r driniaeth os yw'n well gennych)



3. Wedi i chi gwblhau eich triniaeth, neu i ddod â'r driniaeth i ben ar unrhyw adeg, gwasgwch a dal y botwm 'start' fel yn y llun uchod. Efallai y bydd eiliad neu ddwy cyn i'r peiriant orffen chwythu aer.


Ychwanegu Therapi Ocsigen



Pan fo angen ocsigen byddwch yn gweld porth arall rhwng y peiriant a'r tiwbiau.



I ychwanegu ocsigen, tynnwch y cap, fel yn y llun.

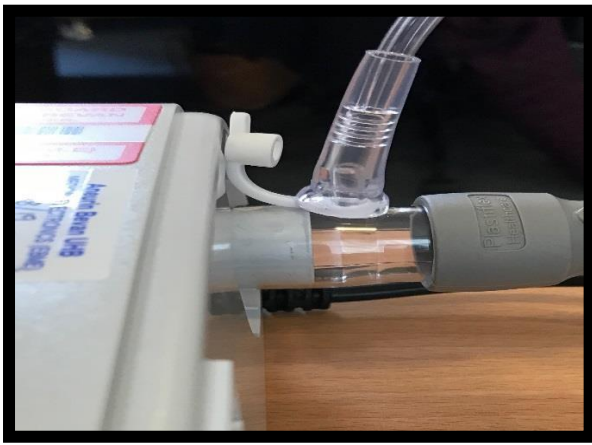

Cysylltwch diwb yr ocsigen â'r porthol fel y dangosir.

Cynhyrchwyd y daflen gan: Lyndsey Ward,
Uwch Ymarferydd Nyrsio Resbiradol
Sam Jones, Nyrs Resbiradol Arbenigol,
Uned Cymorth Anadlu Anfewnwthiol

**“Mae’r ddogfen hon ar gael yn Saesneg /
This document is available in English”.**